


多层管



多层管断面

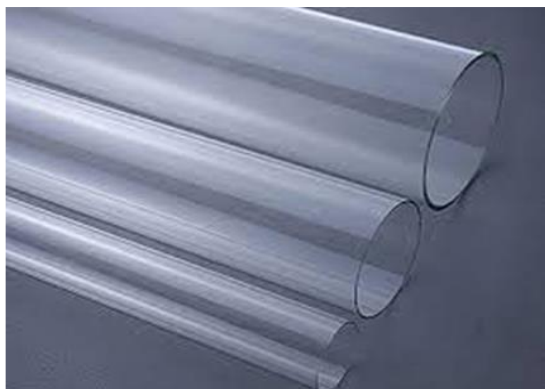

我们的多层管具有较高度的同心率（超过90%）。使导管能平均及有效地承受高压。与焊接管不同，通过挤出的工艺，我司的无缝精密管可满足重要的公差。适用于需要均匀压力传输的产品，如球囊导管，以确保气囊和血管之间的紧密的贴合。

产品规格

- 壁厚: 0.0020" – 0.0047 (0.05 – 0.12mm)
- 外径: 0.016" - 0.039" (0.4 - 1.0mm)
- 外径公差: $\pm 0.0008"$ ($\pm 20\mu\text{m}$)
- 材料: 通用树脂 (HDPE, PA, PA Elastomer, TPU等)
- 层数: 2或3层, 各层可使用不同聚合物
- 长度: Max. 1500mm
- 层数比率: 内层 10 - 20%, 中层 10 - 80%, 外层 10 - 70%

3层管的同心度 Asahi vs General (内部调查)

